

# Oxygène Liquide

## ● Généralités

Le système contient de **l'oxygène liquide médical**.

Utilisez-le uniquement pour votre traitement d'oxygénothérapie.

Ne le laissez pas à la portée des enfants. Le traitement par oxygénothérapie ne doit se faire que sur prescription médicale et en respectant les débits prescrits.

Dans le but d'inclure votre prescription d'oxygénothérapie dans la globalité de votre médication, nous vous recommandons d'informer votre pharmacien d'officine de la prise de ce traitement.

Pour votre sécurité d'approvisionnement, vérifiez périodiquement l'indicateur de niveau de la réserve.


Si le niveau est inférieur à 1/4, demandez à **Ax'Air Médical** de venir remplir la cuve.

## ● Principes de fonctionnement

*Oxygène maintenu sous forme liquide à une température de  $-183\text{ °C}$  dans un réservoir « thermos » de 30 ou 45 litres.*



Cuve d'oxygène liquide

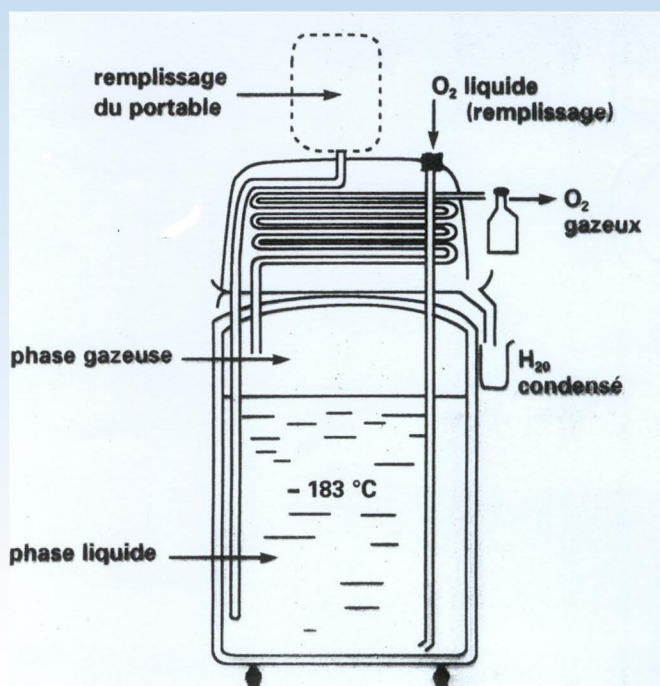

### Dans cette fiche

- Généralités
- Principes de fonctionnement
- Autonomie
- Nettoyage et Désinfection

# Oxygène Liquide (2)

## ● Autonomie

« Prévenez  
Ax'Air Médical de  
toute modification de  
votre prescription  
( durée ou débit ) »

### ● Oxygène réservoir fixe

		Votre débit ( en litre par minute )									
		0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7
Capacité de votre réservoir en litre	44	51 j	25 j	17 j	12 j	10 j	8 j	6 j	5 j	4 j	3,5 j
	32	37	18	12	9	7	6	4,5	3,5	3	2,5
	20	23	11,5	7	6 j	4,5 j	3,5 j	2,5 j	2 j 8 h	1,5 j	1 j 16 h

### ● Oxygène réservoir portable

		Votre débit ( en litre par minute )							
		0,5	1	1,5	2	3	4	5	
Capacité de votre portable	1,2	22 h	11 h	8 h	6 h	4 h	3 h	2 h	
	0,5	10 h	5 h	3 h	2h30	2 h	1h15		

## ● Nettoyage et désinfection

La désinfection courante ne concerne que les accessoires de mise en œuvre (humidificateur, lunettes, etc..)

### > Humidificateur

#### \* Chaque jour :

- Videz l'eau de l'humidificateur.
- Rincez le récipient de l'humidificateur à l'eau courante.
- Remplissez l'humidificateur jusqu'à la moitié.

#### \* Périodiquement :

- Désinfectez les matériels en les plongeant dans une solution désinfectante.
- Rincez à l'eau courante.
- Vérifiez l'état du joint



Masque à oxygène  
Débit supérieur à 5 l /  
min

### > Lunettes ou masques

- Lavez-les avec de l'eau savonneuse tiède.
- Si nécessaire, plongez-les dans une solution désinfectante.
- Rincez à l'eau bouillie et faites sécher.



Lunettes à oxygène